

ISOMAR® AR سبراي لإزالة الاحتقان بحمض الهيالورونيك

محلول مفرط التوتر من ماء البحر في تشينكويه تيريه.

ISOMAR® سبراي لإزالة الاحتقان بحمض الهيالورونيك له تأثير مزدوج لصحة الجهاز التنفسي:

1 **ماء البحر النقي يعمل بشكل طبيعي على إزالة الاحتقان وعلى التسييل، مما يعزز الراحة السريعة في حالة انسداد الأنف.** يساعد على تصريف الإفرازات عن طريق الحفاظ على نظافة الممرات الأنفية وتسهيل التنفس.


2 **يحافظ حمض الهيالورونيك على ليونة الغشاء المخاطي، ويعطي المنتج نشاطاً وقائياً للخلايا من الجفاف، مما يقلل من خطر الجفاف والإصابات الدقيقة داخل تجويف الأنف التي يمكن أن تحدث في حالة نزلات البرد الشديدة أو التهاب الأنف التحسسي أو التهاب الجيوب الأنفية.**

التركيب: ماء البحر مفرط التوتر (تركيز الملح الطبيعي في ماء البحر قرابة 3%)، هيلورونات الصوديوم. الغاز الدافع الخامل: نيتروجين. لا يحتوي على مواد حافظة ولا على ملونات. **دواعي الاستعمال:** يستخدم ISOMAR® سبراي لإزالة الاحتقان بحمض الهيالورونيك بحمض الهيالورونيك لتعزيز الراحة السريعة من احتقان الأنف في حالة: نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية بشكل عام من جيوب اللقاح.

يمكن استخدام ISOMAR® سبراي لإزالة الاحتقان بحمض الهيالورونيك بحد أقصى 3 مرات في اليوم. يُنصح به لكل من البالغين والأطفال فوق سن 12 شهراً. لا يسبب الإدمان، ولا يضر الغشاء المخاطي، ويمكن استخدامه أيضاً أثناء الحمل. بفضل وجود حمض الهيالورونيك، فهو مناسب أيضاً للعلاجات المتكررة.

طريقة الاستعمال: للاستخدام الصحيح، أدخل الفوهة برفق في فتحة الأنف وقم ببخ 1-2 بخة في فتحة الأنف بحد أقصى 3 مرات في اليوم. دع المحلول يعمل لبضع ثوان قبل أن تنفث أنفك. بعد استخدام ISOMAR® سبراي لإزالة الاحتقان بحمض الهيالورونيك أزل الصنبور، واغسله بالماء وجففه. إذا استمرت الحالة المزعجة، استشر طبيب ثقة أو أخصائي. ينبغي أن لا تتجاوز فترة العلاج أسبوعين. لا تتجاوز الجرعة المحددة. يمكن استخدام بخاخ ISOMAR® سبراي بشكل راسي ومقلوب لجعل غسيل الأنف للبالغين والأطفال أكثر اكتمالاً وبساطة. الاستخدام عمودياً: يسمح استخدام البخاخ العمودي بالوصول بشكل أفضل إلى جميع تجاويف الحاجز الأنفي من أجل تنظيف كامل وسريع. الاستخدام بالمقلوب: لاستخدام المنتج على الأطفال فوق 12 شهراً في وضع الاستلقاء.

موانع الاستعمال: لا تستخدم ISOMAR® سبراي لإزالة الاحتقان بحمض الهيالورونيك للرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً. لا يُستخدم في حالة الرعاف. **تحذير:** إذا وضعت العبوة تحت الضغط: قد تنفجر إذا تم تسخينها. يحفظ بعيداً عن الحرارة، والأسطح الساخنة، والشرر، والسنة اللهب المكشوفة أو مصادر الاشتعال الأخرى. ممنوع التدخين. لا يُحرق أو يُحرق، حتى بعد الاستعمال. احمه من أشعة الشمس. لا تعرضه لدرجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية/122 درجة فهرنهايت. لا تستخدم مع العلاجات الموضعية الأخرى. احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال. استخدم المنتج خصيصاً للاستخدام الذي صُنع من أجله. يُستخدم للأطفال من عمر 12 شهراً، ويجب أن يستخدم المنتج شخص بالغ. إن الفشل في المحافظة على سلامة المنتج قد يغير الخصائص الوظيفية له. لا تستخدمه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. خزّنه في درجة حرارة بين 5 درجات مئوية و 25 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت - 77 درجة فهرنهايت). في بعض الحالات، يمكن أن يكون المنتج مزعجاً إلى الحد الأدنى.

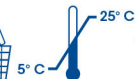

IT ISOMAR® Spray Decongestionante con Acido Ialuronico

Soluzione ipertonica di acqua di mare delle Cinque Terre

Isomar Spray Decongestionante con Acido Ialuronico ha una duplice azione per il benessere delle vie respiratorie:

1 **L'acqua di mare allo stato puro** naturalmente decongestionante e fluidificante favorisce un rapido sollievo in caso di naso chiuso. Aiuta il drenaggio delle secrezioni mantenendo la pulizia delle fosse nasali e agevolando la respirazione.

2 **L'Acido Ialuronico** mantiene la mucosa morbida e dona al prodotto un'attività di protezione delle cellule dalla disidratazione riducendo il rischio di secchezza e microlesioni all'interno della cavità nasali che possono incorrere in caso di forti raffreddori, riniti allergiche o sinusiti.

COMPOSIZIONE: Acqua di mare ipertonica (Concentrazione salina naturale dell'acqua di mare intorno al 3%), Ialuronato di Sodio. Gas propellente inerte: azoto. Non contiene né conservanti né coloranti.

INDICAZIONI: Isomar Spray Decongestionante con Acido Ialuronico è indicato per un rapido sollievo dalla congestione nasale in caso di: raffreddore, bronchite, sinusiti, allergie in genere anche da polline. È indicato sia negli adulti che nei bambini sopra i 12 mesi di età. Non induce assuefazione, non danneggia la mucosa e si può utilizzare anche in gravidanza. Grazie alla presenza dell'Acido Ialuronico è indicato anche per trattamenti frequenti.

MODALITÀ D'USO: Per un corretto utilizzo introdurre delicatamente il beccuccio nella narice ed effettuare 2-3 nebulizzazioni per narice fino ad un massimo di 3 volte al giorno. Lasciare agire la soluzione per alcuni secondi prima di soffiarsi il naso. Dopo aver utilizzato Isomar Spray Decongestionante con Acido Ialuronico, rimuovere il beccuccio, lavare con acqua ed asciugarlo. Se il disturbo persiste consultare il proprio medico di fiducia o uno specialista. Si consiglia di non superare le due settimane di trattamento. Non eccedere la dose consigliata. Isomar Spray può essere utilizzato sia in verticale che capovolto per rendere ancora più completo e semplice il lavaggio nasale degli adulti e dei bambini. IN VERTICALE: l'utilizzo dello spray in verticale permette di raggiungere meglio tutti gli incavi del setto nasale per una pulizia più completa e rapida. CAPOVOLTO: per applicare il prodotto nei bambini sopra i 12 mesi in posizione distesa.

CONTROINDICAZIONI: Non utilizzare Isomar Spray Decongestionante con Acido Ialuronico in bambini di età inferiore ai 12 mesi. Non utilizzare in caso di epistassi.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50° C/122° F. Non utilizzare in concomitanza ad altri trattamenti topici. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato. Sui bambini può essere utilizzato a partire dai 12 mesi e deve essere applicato da un adulto. Un mancato controllo dell'integrità del prodotto potrebbe alterarne le caratteristiche funzionali. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Conservare a una temperatura compresa tra 5° C e 25° C (41° F - 77° F). In alcuni casi il prodotto può risultare minimamente irritante.

EN ISOMAR® Decongestant Spray with Hyaluronic Acid

Hypertonic seawater solution from Cinque Terre

Isomar Decongestant Spray with Hyaluronic Acid has a dual action for the well-being of the respiratory tract:

1 **Pure seawater** is a natural decongestant and fluidifying agent that rapidly helps free blocked nose. It improves drainage of secretions, keeping the nasal passages clean and facilitating breathing.

2 **Hyaluronic acid** keeps the mucous membranes soft and protects cells from dehydration, reducing the risk of dryness and micro injuries in the nasal cavities that may occur in case of severe colds, allergic rhinitis or sinusitis.

COMPOSITION: Hypertonic seawater (natural seawater salt concentration of around 3%), sodium hyaluronate. Inert propellant gas: nitrogen. Preservative and dye free.

RECOMMENDED USE: Isomar Decongestant Spray with Hyaluronic Acid is recommended for fast relief from congested nose in the event of colds, bronchitis, sinusitis, allergies in general (including pollen). The product is suitable for use in adults and children over 12 months. The product is non-addictive, does not damage the nasal mucosa, it does not produce overdose and can be used even during pregnancy. Hyaluronic acid makes it suitable for frequent use.

DIRECTIONS FOR USE: Gently introduce the nozzle into the nostril and spray 2-3 times per nostril up to a maximum of three times a day. Leave for a few seconds before blowing the nose. After using Isomar Decongestant Spray with Hyaluronic Acid, remove, wash and dry the nozzle. If the problem persists, consult your doctor or a specialist. Do not use for more than two weeks. Do not exceed the recommended dose. Isomar Spray can be used both vertically and horizontally to make nasal washing for adults and children even easier and more thorough. VERTICAL: the vertical use of the spray allows for the better reaching of all the grooves within the nasal septum, for quicker and more complete cleansing. HORIZONTAL: in children over the age of 12 months, apply the product in a horizontal position.

CONTRAINDICATIONS: Do not use Isomar Decongestant Spray with Hyaluronic Acid in children younger than 12 months. Do not use in case of epistaxis.

WARNINGS: Pressurized container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50° C/122° F. Do not use concomitantly with other topical treatments. Keep out of reach of children. For intended use only. The product is suitable for use in children over 12 months and must be applied by an adult. Failure to ensure the integrity of the product may alter its functional characteristics. Do not use after the expiry date. Store at a temperature between 5° C and 25° C (41° F - 77° F). In some cases the product may be slightly irritating.

FR ISOMAR® Spray Décongestionnant à l'Acide Hyaluronique

Solution Hypertonique d'eau de mer des Cinq Terres

Isomar Spray Décongestionnant à l'Acide Hyaluronique a une double action pour le bien-être des voies respiratoires:

1 L'eau de mer à l'état pur naturellement décongestionnante et fluidifiante favorise un soulagement rapide en cas de nez bouché. Elle aide au drainage des sécrétions en maintenant les fosses nasales propres et en facilitant la respiration.

2 L'Acide Hyaluronique maintient la muqueuse souple et permet au produit de protéger les cellules contre la déshydratation en réduisant le risque de sécheresse et de micro-lésions à l'intérieur de la cavité nasale, qui peuvent survenir en cas de rhumes forts, de rhinites allergiques ou de sinusites.

COMPOSITION: Eau de mer hypertonique (Concentration saline naturelle de l'eau de mer aux alentours de 3%), Hyaluronate de Sodium. Gaz propulseur inerte: azote. Ne contient ni conservateurs, ni colorants.

MODE D'EMPLOI: Isomar Spray Décongestionnant à l'Acide Hyaluronique est indiqué pour un soulagement rapide du nez bouché en cas de: rhume, bronchite, sinusite, allergies en général également au pollen. Il est indiqué aussi bien chez les adultes que chez les enfants de plus de 12 mois. Il ne provoque aucune accoutumance, n'endommage pas la muqueuse et peut être utilisé, même en cas de grossesse. Grâce à la présence de l'Acide Hyaluronique, il est indiqué même pour des traitements fréquents.

MODE D'EMPLOI: Pour une utilisation correcte, introduire délicatement l'embout dans la narine et effectuer 2-3 nébulisations par narine jusqu'à un maximum de 3 fois par jour. Laisser agir la solution quelques secondes, avant de se moucher le nez. Après chaque utilisation de **Isomar Spray Décongestionnant à l'Acide Hyaluronique**, enlever l'embout, le laver à l'eau et le sécher. Si la gêne persiste, consulter votre médecin de confiance ou un spécialiste. Il est conseillé de ne pas dépasser deux semaines de traitement. Ne pas dépasser la dose conseillée. **Isomar Spray** peut être utilisé tant à la verticale que retourné, pour rendre le lavage nasal chez les adultes et les enfants encore plus complet et simple. À LA VERTICALE: l'utilisation du spray à la verticale permet de mieux atteindre toutes les cavités de la cloison nasale, pour un nettoyage plus complet et rapide. RETOURNÉ: pour appliquer le produit chez les enfants de plus de 12 mois en position allongée.

CONTRE-INDICATIONS: Ne pas utiliser **Isomar Spray Décongestionnant à l'Acide Hyaluronique** chez les enfants de moins de 12 mois. Ne pas utiliser en cas d'épistaxis.

AVERTISSEMENTS: Récipient sous pression: peut exploser s'il est réchauffé. Conserver loin des sources de chaleur, surfaces chaudes, étincelles, flammes nues ou autres sources d'amorçage. Ne pas fumer. Ne pas percer et ne pas brûler même après l'utilisation. Protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C/122° F. Ne pas utiliser en même temps que d'autres traitements topiques. Conserver hors de portée des enfants. N'utiliser le produit que pour l'usage pour lequel il a été prévu. Il peut être utilisé sur les enfants à partir de l'âge de 12 mois et doit être appliqué par un adulte. Si le produit n'est pas en bon état, ses caractéristiques fonctionnelles pourraient être altérées. Ne pas utiliser après la date de péremption. Conserver à une température comprise entre 5° C et 25° C (41° F - 77° F). Dans certains cas, le produit peut être légèrement irritant.

ES ISOMAR® Spray Décongestionnant à l'Acide Hyaluronique

Solution Hypertonique d'eau de mer des Cinq Terres

Isomar Spray Descongestionante con Ácido Hialurónico ejerce una doble acción para contribuir al bienestar de las vías respiratorias:

1 El agua marina en estado puro, naturalmente descongestionante y fluidificante, alivia rápidamente la congestión nasal. Favorece el drenaje de las secreciones manteniendo la limpieza de las fosas nasales y facilitando la respiración.

2 El ácido hialurónico mantiene blanda la mucosa y protege las células de la deshidratación, reduciendo así el riesgo de sequedad y microlesiones dentro de las cavidades nasales existente en caso de resfriados fuertes, rinitis alérgicas o sinusitis.

COMPOSICIÓN: Agua marina hipertónica (concentración salina natural del agua de mar de aproximadamente el 3%), ácido hialurónico. Gas propelente inerte: nitrógeno. Sin colorantes ni conservantes.

INDICACIONES DE USO: Isomar Spray Descongestionante con Ácido Hialurónico está indicado para aliviar rápidamente la congestión nasal en caso de: resfriado, bronquitis, sinusitis y alergias en general, también al polen. Está indicado tanto en adultos como en niños de más de 12 meses. No provoca adicción, no daña la mucosa y se puede utilizar también durante el embarazo. Gracias a la presencia del ácido hialurónico, también está indicado para tratamientos frecuentes.

MODO DE EMPLEO: Para un empleo correcto, introducir con cuidado el nebulizador en la nariz y realizar 2-3 nebulizaciones por fosa nasal hasta un máximo de 3 veces al día. Dejar actuar la solución durante unos segundos antes de sonarse la nariz. Después de haber utilizado **Isomar Spray Descongestionante con Ácido Hialurónico**, retirar el nebulizador, lavar con agua y secar. Si la molestia persiste consulte con su médico de confianza o con un especialista. Se aconseja que no superen las dos semanas de tratamiento. Não exceder a dose recomendada. **Isomar Spray** puede utilizarse tanto en vertical como en horizontal, para que el lavado nasal en adultos y niños sea aún más completo y sencillo. EN VERTICAL: el uso del spray en vertical permite llegar mejor a todas las cavidades del tabique nasal, para lograr una limpieza más completa y rápida. EN HORIZONTAL: para aplicar el producto en niños mayores de 12 meses que se encuentren tumbados.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar las ampollas **Isomar Spray Descongestionante con Ácido Hialurónico** en niños de menos de 12 meses. No utilizar en caso de epistaxis.

ADVERTENCIAS: Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, ni siquiera después del uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50° C/122° F. No utilizar junto con otros tratamientos tópicos. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar el producto únicamente para el fin al que está destinado. Se puede utilizar en niños a partir de 12 meses de edad y debe ser aplicado por un adulto. Un fallo en la integridad del producto puede alterar sus características funcionales. No utilizar después de la fecha de caducidad. Almacenar a una temperatura entre 5° C y 25° C (41° F - 77° F). En algunos casos el producto puede ser ligeramente irritante.

PT ISOMAR® Spray Descongestionante com Ácido Hialurónico

Solução hipertónica de água do mar de Cinq Terre

Isomar Spray Descongestionante com Ácido Hialurónico tem uma ação benéfica ao nível das vias aéreas, através da sua dupla ação:

1 A água do mar pura é um agente descongestionante e fluidificante natural que ajuda a limpar rapidamente o nariz entupido. Promove a drenagem das secreções, mantendo as cavidades nasais limpas e facilitando a respiração.

2 O Ácido Hialurónico mantém a mucosa suave e protege as células de desidratação, reduzindo o risco de secura e microlesões na cavidade nasal que ocorrem em caso de fortes constipações, rinites alérgicas ou sinusites.

COMPOSIÇÃO: Água do mar hipertónica (concentração salina natural da água do mar aproximadamente de 3%), hialuronato de sódio. Gás propulsor inerte: azoto. Não contém conservantes nem corantes.

USO RECOMENDADO: Isomar Spray Descongestionante com Ácido Hialurónico é indicado para um alívio rápido do nariz entupido em caso de constipação, bronquite, sinusite, alergias em geral (incluindo pólen). É indicado para adultos e crianças com mais de 12 meses de idade. Não induz habituação, não danifica a mucosa e pode ser usado também durante a gravidez. Graças à presença do ácido hialurónico é indicado para uso frequente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Introduza delicadamente o bocal na narina e realize 2-3 nebulizações por narina até um máximo de 3 vezes por dia. Deixe atuar a solução durante alguns segundos antes de assoar o nariz. Depois de ter usado **Isomar Spray Descongestionante com Ácido Hialurónico**, remova o bocal, lave com água e seque-o. Se o problema persistir, consulte o seu médico ou um especialista. Aconselha-se não superar duas semanas de tratamento. Não exceder a dose recomendada. O **Isomar Spray** pode ser utilizado tanto na vertical como na horizontal para tornar a lavagem nasal em adultos e em crianças ainda mais completa e simples. NA VERTICAL: a utilização do spray na vertical permite alcançar da melhor forma todas as cavidades nasais para uma limpeza mais completa e rápida. NA HORIZONTAL: para aplicar o produto em crianças com mais de 12 meses em posição deitada.

CONTRAINDICAÇÕES: Não utilizar o **Isomar Spray Descongestionante com Ácido Hialurónico** em crianças com menos de 12 meses. Não utilizar em caso de hemorragias nasais (epistaxis).

ADVERTÊNCIAS: Recipiente sob pressão: pode rebentar quando aquecido. Mantenha longe de fontes de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas livres ou outras fontes de ignição. Não fume. Não fure nem queime, nem seque após o uso. Proteja dos raios solares. Não exponha a temperaturas superiores a 50° C/122° F. Não utilizar juntamente com outros tratamentos tópicos. Mantenha fora do alcance das crianças. Utilize o produto exclusivamente para o fim para que foi projetado. Pode ser usado em crianças a partir dos 12 meses e deve ser aplicado por um adulto. A não verificação da integridade do produto poderá alterar as suas características funcionais. Não utilize após a data de validade. Conserve a uma temperatura entre 5° C e 25° C (41° F - 77° F). Em alguns casos, o produto pode ser irritante mínimo.

EL ISOMAR® Αποσυμφορητικό Σπρέι με Υαλουρονικό οξύ

Υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού από την περιοχή Τσίγκουε Τέρε

Isomar Αποσυμφορητικό Σπρέι με Υαλουρονικό Οξύ ασκεί διπλή δράση για την υγιεινή των αναπνευστικών οδών:

1 Το καθαρό θαλασσινό νερό με τη φυσική αποσυμφορητική και ρευστοποιητική δράση παρέχει άμεση ανακούφιση για τη βουλωμένη μύτη. Βοηθά στην αποβολή των εκκρίσεων διατηρώντας την καθαριότητα των ρινικών κοιλοτήτων και διευκολύνοντας την αναπνοή.

2 Το Υαλουρονικό οξύ διατηρεί τον βλεννογόνο απαλό και παρέχει στο προϊόν μια δράση προστασίας των κυττάρων από την αφυδάτωση, μειώνοντας τον κίνδυνο ξηρότητας και μικροτραυματισμών του εσωτερικού των ρινικών κοιλοτήτων που μπορούν να προκληθούν σε περίπτωση ισχυρού κρυολογήματος, αλλεργικής ρινίτιδας ή παραρρινοκολπίτιδας.

ΣΥΝΘΕΣΗ: υπέρτονο θαλασσινό νερό (φυσική συγκέντρωση αλάτων θαλασσινού νερού 3%), Υαλουρονικό νάτριο. Αδρανές πρoυθητικό αέριο: άζωτο. Δεν περιέχει συντηρητικά και χρωστικές. **ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** **Isomar Αποσυμφορητικό Σπρέι με Υαλουρονικό Οξύ** είναι ενδεδειγμένο για άμεση ανακούφιση της βουλωμένης μύτης σε περίπτωση: κρυολογήματος, βρογχίτιδας, παραρρινοκολπίτιδας και αλλεργιών γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της αλλεργίας από γύρη. Είναι ενδεδειγμένο τόσο για ενήλικες, όσο και για παιδιά άνω των 12 μηνών. Δεν προκαλεί εξάρτηση και βλάβες στον βλεννογόνο, δεν ενέχει κίνδυνο υπερδοσολογίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την εγκυμοσύνη. Χάρη στην παρουσία του Υαλουρονικού Οξέος είναι ενδεδειγμένο ακόμα και για συχνές χρήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για τη σωστή χρήση, εισάγετε απαλά το στόμιο στο ρουθούνι και ψεκάστε 2-3 φορές σε κάθε ρουθούνι έως το πολύ 3 φορές την ημέρα. Πριν φυσήξετε τη μύτη, αφήστε το διάλυμα να δράσει για μερικά δευτερόλεπτα. Μετά τη χρήση του **Isomar Αποσυμφορητικό Σπρέι με Υαλουρονικό Οξύ**, αφαιρέστε το στόμιο, πλύνετε με νερό και σκουπίστε το. Αν η ενόχληση εξακολουθεί, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν ειδικό. Συνιστάται η χρήση να μην υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Το **Isomar Σπρέι** μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κάθετη θέση όσο και γυρισμένο ανάποδα, καθιστώντας ακόμη πιο αποτελεσματική και απλή τη ρινική πλύση σε ενήλικες και παιδιά. ΚΑΘΕΤΑ: η χρήση του σπρέι σε κάθετη θέση επιτρέπει στο διάλυμα να φτάσει καλύτερα σε όλες τις εσοχές της ρινικής κοιλότητας για έναν αποτελεσματικότερο και γρήγορο καθαρισμό. ΑΝΑΠΟΔΑ: για τη χρήση του προϊόντος σε παιδιά άνω των 12 μηνών σε ξαπλωτή θέση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: μην χρησιμοποιείτε τις **Isomar Αποσυμφορητικό Σπρέι με Υαλουρονικό Οξύ** σε νεογνά με ηλικία μικρότερη των 12 μηνών. Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση επίσταξης. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Περιέκτης υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Μακριά από πηγές θερμότητας, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην τρoπάτε ή καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°/122° F. Μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλες τοπικές θεραπείες. Μακριά από παιδιά. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά άνω των 12 μηνών με τη βοήθεια ενός ενήλικα. Ελέγχετε την ακεραιότητα του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αλλοιωθεί τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Μην χρησιμοποιείτε μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης. Διατηρείται σε θερμοκρασία από 5° C έως 25° C (41° F - 77° F). Σε ορισμένες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να είναι ελάχιστα ερεθιστικό.